


ICSI Prosedürü

Eklenmiş G5 Series™ medyumlara albumin eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgiyi G5 Series™ Kılavuz'da bulabilirsiniz. Eklenmiş medyumlara albumin ilavesi yapıldıktan sonra, aşağıda kullanımı tarif edilen G5 Series PLUS medyumlar gibi kullanılmalıdır.

"0. Gün"

1. Kültür kaplarını hazırlayınız.

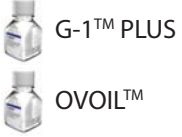

G-1™ PLUS ile kültür kaplarını hazırlayınız.

37 °C sıcaklıkta ve % 6 CO₂ içeren ortamda en az 4 saat öndengelemeye tabi tutunuz.




Kullanılacak tüm aletleri, tüpleri ve kapları G-RINSE™ ile durulayınız.

G-MOPS™ PLUS CO₂ 'li bir inkübatöre asla koyulmamalıdır.

G-MOPS™ PLUS CO₂ 'li ortamda dengelenmiş OVOIL™ ile asla kaplanmamalıdır.

2. Denudasyon kaplarını hazırlayınız.

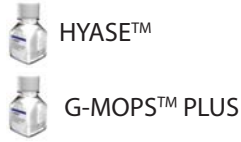

G-MOPS™ PLUS ile dilüe edilmiş HYASE™ ve G-MOPS™ PLUS içeren durulanmış denudasyon kaplarını hazırlayınız.

37 °C sıcaklıkta ve CO₂ 'siz ortamda 15 dakika ısıtınız.

1 saat içinde kullanınız.

3. ICSI kaplarını hazırlayınız.



ICSI™ ve G-MOPS™ PLUS damlacıkları ile ICSI kaplarını hazırlayıp OVOIL™ ile kaplayınız.

37 °C sıcaklıkta ve CO₂ 'siz ortamda 15 dakika ısıtınız.

Denudasyon ve yıkama işlemleri boyunca kullandığınız medyumun 37 °C sıcaklıkta kaldığından emin olunuz.

4. Denudasyon

Oositleri HYASE™ içinde denude ediniz ve ısıtılmış G-MOPS™ PLUS içinde 3 kez yıkayınız.



HYASE™ ile 30 saniyeden fazla temas oositlere zarar verebilir.

5. ICSI

Spermi ICSI™ damlacığına ekleyiniz. Denude edilmiş oositleri G-MOPS™ PLUS damlacıklarına transfer ediniz. Her seferinde en fazla 4 oosit alarak her bir damlacığa birer oosit koyunuz. ICSI işlemini yapınız.



ICSI sırasında kullanılan ısıtıcı tablayı, **damlacıkların sıcaklığı 37 °C olacak** şekilde ayarlayınız.

6. Yıkama ve kültür

Enjekte edilmiş oositleri G-1™ PLUS içeren damlacıklarda yıkayınız ve taze G-1™ PLUS içeren damlacıklara transfer ediniz.



37 °C sıcaklıkta ve % 6 CO₂ içeren ortamda gece boyunca kültürleyiniz.

Fertilizasyon değerlendirme ve kültür için: bkz. **Embriyo Kültürü**.